

RICHIESTE DI PREVENTIVO

Contattaci per avere informazioni, saremo lieti di poterti offrire un servizio di qualità.

CONTATTI

Tel: 0331.841508
N. Verde 800.204323

E-Mail: info@belsar.it
Web: www.belsar.com

+ INDIPENDENZA
+ VALORE
ALLA SICUREZZA

Servizio di convalida AUTOCLAVI



Dal 1987 con esperienza e professionalità Belsar segue con cura il buon funzionamento della strumentazione diagnostica in vitro, nel rispetto delle specifiche tecniche e delle Normative di riferimento con costante aggiornamento delle procedure adottate.

Belsar propone, a tutti i clienti che già ci apprezzano per il servizio di manutenzione convalida delle cappe da laboratorio, anche il servizio di riconvalida delle autoclavi; fino a 250 litri la riconvalida del processo con taratura delle sonde e verifica dei processi di sterilizzazione viene eseguito tramite l'utilizzo di dataloggers di ultima generazione.

Normative di riferimento

Convalida dei processi di sterilizzazione secondo quanto previsto dalle norme:

• UNI EN 554/96 e UNI EN ISO 17665-1

Sterilizzazione dei dispositivi medici - Metodo per la convalida e il controllo sistematico della sterilizzazione a vapore

• UNI EN 556-1 e 556-2

Sterilizzazione dei dispositivi medici - Requisiti per i dispositivi medici che recano l'indicazione "STERILE"

• UNI EN 285/06

Grandi sterilizzatrici a vapore

Controlli e Verifiche periodiche per assicurare il mantenimento dell'efficienza dell'apparecchiatura

QUALIFICA DI PRESTAZIONE

(detta comunemente Convalida)


Consiste in una metodologia, definita dalla UNI EN 554, allo scopo di qualificare/validare gli strumenti di controllo della sterilizzatrice per assicurare l'affidabilità dei processi di sterilizzazione. Prevede: una accettazione in servizio o collaudo, una qualifica di prestazione fisica (obbligatoria) e microbiologica (facoltativa).

Ogni configurazione di carico ed ogni variante devono prima essere documentate e, solo successivamente, introdotte nell'uso di routine.

In sintesi la qualifica di prestazione fisica

va effettuata:

- annualmente
- nel caso si verifichi un rilevante intervento di riparazione all'apparecchiatura che possa influire sulle prestazioni della sterilizzatrice e sull'efficacia del processo
- nel caso vengano apportati da parte del produttore della sterilizzatrice cambiamenti significativi, sia hardware che software
- quando vengano introdotte nuove tipologie di carico o di

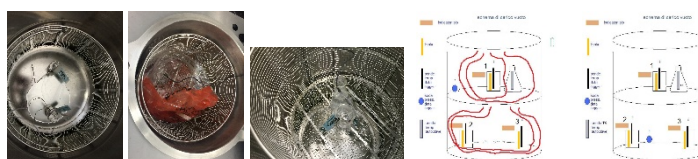

ALTRE

APPARECCHIATURE

Cappe a flusso laminare e chimiche

Armadi aspirati

Incubatori CO2

Centrifughe

Cappe anaerobiche

ZERO INATTIVITÀ

Tempi di intervento rapidi in

TUTTA ITALIA

SOLUZIONI CHIAVI IN MANO

Contratti di manutenzione personalizzati per ogni tipo di esigenza

Per ulteriori informazioni sui nostri prodotti o servizi, visitare il sito Web all'indirizzo

www.belsar.com

I nostri servizi



SOLUZIONI DI ASSISTENZA

Siamo centro di assistenza Autorizzato per la Strumentazione:



Autoclavi

Multisteril

CONVALIDA AUTOCLAVI CON E SENZA VUOTO

Rilascio di certificazione delle grandezze su nr. 1 ciclo di sterilizzazione o più

- CICLO DI PROVA DI RISCALDAMENTO
- CICLO DI PROVA CON TEST VUOTO
- TEST DI HELIX
- CICLO STERILIZZAZIONE
- VERIFICA PRESSIONE E TEMPERATURA DURANTE I CICLI CON REGISTRAZIONE DELLE TEMPERATURE TRAMITE DATALOGGER

MANUTENZIONE PREVENTIVA (ORDINARIA)

Generalmente comprendente:

- Verifica delle guarnizioni di tenuta delle porte
- Verifica dell'efficienza di tutti i dispositivi di sicurezza
- Verifica degli strumenti indicatori e di registrazione
- Pulizia di tutti i filtri e della caldaia
- Verifica dell'efficienza della valvola di sicurezza
- Verifica delle pompe e dei circuiti idraulici
- Lubrificazione delle parti meccaniche

SOLUZIONI DI SUPPORTO

- COLLAUDO e INSTALLAZIONI
- RIPARAZIONI URGENTI
- RIPARAZIONI NERL PERIODO DI GARANZIA
- QUALIFICA DI PRESTAZIONE
- TEST DI UMIDITA' RESIDUA
- PROVA TERMOMETRICA
- VERIFICA PERIODICA DELLA SICUREZZA ELETTRICA, CONFORME ALLE NORMATIVE EN 61010
- MANUTENZIONE PREVENTIVA
- APPARECCHIATURE SOSTITUTIVE



Belsar srl - Assistenza tecnica



Via Fratellanza 6/B 21049 - Tradate (VA)
Tel.: 0331-841502
Numero Verde: 800.204323
e-mail: info@belsar.it
www.belsar.com