

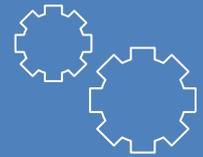
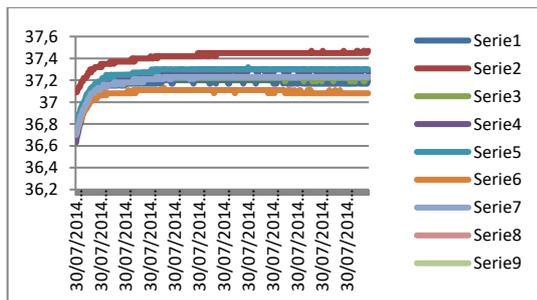
SERVIZIO di ASSISTENZA TECNICA PER INCUBATORI

Assistenza tecnica diretta e conto terzi.

IL MANTENIMENTO DI ADEGUATI RANGE DI TEMPERATURA E DI CONCENTRAZIONE DI CO₂ PERMETTE LA CRESCITA E LA SOPRAVVIVENZA DI SPECIFICHE COLTURE CELLULARI

SERVIZI EFFETTUATI:

- ✓ **INSTALLAZIONE E COLLAUDO:** Interventi di installazione e collaudo presso il cliente; verifica idoneità ambiente di installazione, verifica integrità dell'apparecchiatura da installare, collegamento alle utilities, verifica funzionamento e consulenza per il corretto utilizzo.
- ✓ **VERIFICA TEMPERATURA:** con termometri sottoposti a periodici interventi di taratura, dotati del relativo regolare certificato e con un valore di incertezza idoneo alla tipologia di verifica. Rilascio relativa documentazione tecnica.
- ✓ **VERIFICA CO₂:** con gas analyser sottoposti ad periodici interventi di taratura, dotati del relativo regolare certificato.
- ✓ **VERIFICA SICUREZZA ELETTRICA:** secondo normativa EN 61010: apparecchi da laboratorio.
- ✓ **DECONTAMINAZIONE:** eseguita con vapori di perossido di idrogeno.
- ✓ **CAMPIONAMENTO MICROBIOLOGICO:** verifica specifica eseguita per alcune tipologie di validazione.
- ✓ **CONVALIDA:** qualifica d'installazione, operativa e di performance dell'apparecchiatura per stabilire che un processo produrrà costantemente un prodotto conforme alle specifiche predeterminate. Protocolli di qualifica forniti dal cliente e/o dal costruttore, oppure redatti direttamente da Belsar. Convalida strutturata sulle esigenze di utilizzo del cliente in riferimento alle indicazioni del costruttore, nel rispetto delle normative di riferimento.
- ✓ **MAPPATURA DELLA TEMPERATURA** mediante l'utilizzo di data logger in condizioni specifiche stabilite con il cliente. Verifica di omogeneità e stabilità della temperatura.
- ✓ Ulteriori test su richiesta del cliente.

**SOLUZIONI PERSONALIZZATE**

Richiedi un preventivo Gratuito al nostro Ufficio commerciale:

tel. 0331/841508
e-mail: info@belsar.it

SOLUZIONI WEB

Consulta il nostro sito Web all'indirizzo: www.belsar.com

SOLUZIONI DI ASSISTENZA

Chiamaci al Numero verde: **800.204323**

Per informazioni manda un'email a info@belsar.it o contattaci